

Нефтехимические приборы

Ваш надежный партнер по тестированию нефтехимических продуктов


Описание продукции

Испытательный прибор температуры вспышки и температуры воспламенения нефтепродуктов SYP1001-V-J (метод открытой чашки Кливленда) проектирует и изготавливается в соответствии со стандартами GB/T 3536, ASTM D92, ISO 2592 и подходит для измерения температуры вспышки и температуры воспламенения нефтепродуктов, кроме топливного масла, с температурой вспышки открытой чашки выше 79 °C.

Прибор также соответствует SY/T 5645 «Технические условия на испытательный прибор температуры вспышки и температуры воспламенения нефтепродуктов (метод открытой чашки Кливленда)».

Особенность продукции

- Конструкция новая, проект рациональный, использование удобное
- Высокоточная конструкция уплотнения электрической печи, эффективно продлевает срок службы электрической печи и повышает скорость повышения температуры
- Интеллектуально дистанционно управляет и точно улавливает температуру температуры вспышки и температуры воспламенения
- Имеет функцию предварительной установки температуры вспышки, температуры воспламенения
- Автоматическое программное обеспечение контролирует скорость повышения температуры образца
- Цифровая установка и отображение температуры образца на ЖК-экране

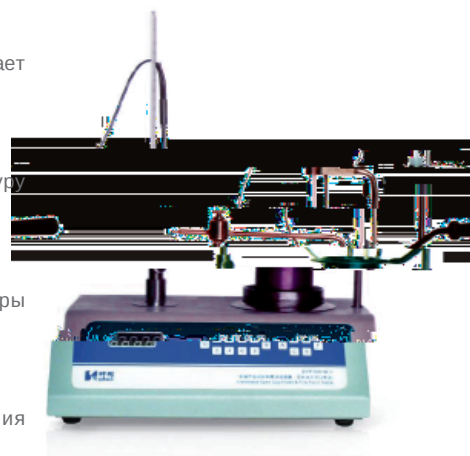

Автоматическое сканирование зажигания, зажигание точное

Функция самопроверки при включении, обеспечит нормальную работу датчика температуры и системы зажигания и сканирования

Прибор комплектуется встроенная трубная эстакада, можно использовать газ, бутан, сжиженный газ и другие газы для зажигания

При превышении ожидаемой температуры вспышки на 21°C или температуры образц аз газы ил L I в y K